


容器名:A1

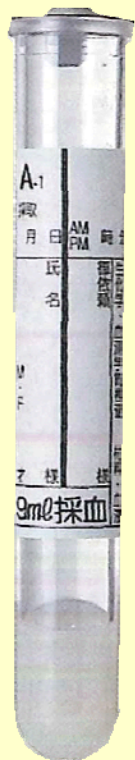

内容	分離剤
容量	9mL
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	1年

### 適用検査項目と採取上の注意点

生化学的検査一般

免疫血清学的検査一般

内分泌学的検査一般

ウイルス検査一般

その他

- 血液(必要量の約3倍)を採取し、5~6回ほど静かに転倒混和したのち、約30分間常温に静置します。凝固完了後遠心分離し、血清を [A2容器](#)に移し替えて冷蔵保存または凍結保存してください。