

先生各位

検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検体採取容器を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

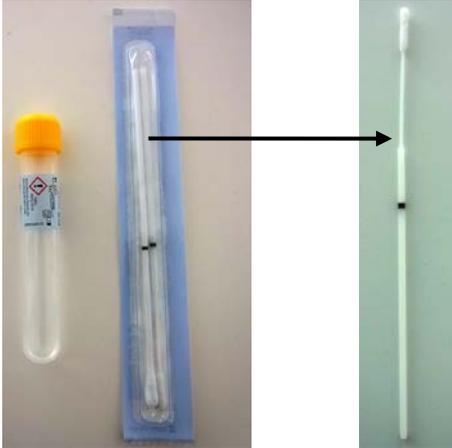
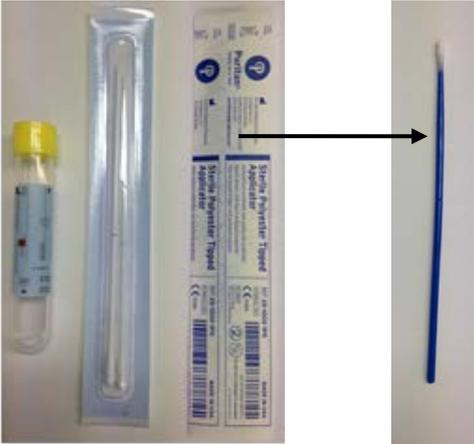
記

《変更日》 現行の容器が無くなり次第順次

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前	
P.71 P.130 P.184	3346	クラミジア トラコマチス PCR	初尿	容器 (QU QS QUG)	下記および次頁 参照	下記および次頁 参照
	1486		分泌物			
	7706		うがい液			
P.72 P.130 P.184	1821	淋菌 PCR	初尿			
	1822		分泌物			
	7708		うがい液			

変更後 (QU・QUG)	変更前 (QU・QUG)
 <p>コバス PCR 尿・うがい液採取セットⅡ</p>	 <p>コバス PCR 尿・うがい液採取セット</p>

変更後 (QS)	変更前 (QS)
 <p data-bbox="555 685 762 741">検体採取用スワブ (フロックスワブ)</p> <p data-bbox="177 779 759 864">コバス PCR スワブ検体採取セットⅢ ・粘液除去用スワブ (大) (1本入り) ・検体採取用スワブ (フロックスワブ) (一本入り)</p>	 <p data-bbox="1158 692 1417 725">検体採取用スワブ (小)</p> <p data-bbox="815 779 1394 864">コバス PCR スワブ検体採取セットⅡ ・粘液除去用・検体採取用スワブ (大) (2本入り) ・検体採取用スワブ (小) (1本入り)</p>

※ 内容液の組成・液量に差異はございません (旧容器 (在庫) での受託も継続致します)。
 ※ その他の内容に変更はございません。

《変更理由》 改良品への変更のため

《補 足》

- 検体採取容器のキャップ (蓋) の構造が改良され、色が濃い黄色に変更されております。
- 検体採取容器のチューブの径が 1mm 程度小さくなり、青ラベルが短くなりました。ラベルが短くなったことにより、チューブ内の液量が見やすくなります。
- QS 容器について、新容器 (コバス PCR スワブ検体採取セットⅢ) に付属されているフロックスワブは、旧スワブ (コバス PCR スワブ検体採取セットⅡ) で採取した時と同等の感度を示し、太いスワブでの採取に比べ患者様への負担を軽減します。
- フロックスワブは先端の軸が細くなっているため、右図のようにキャップとチューブの縁で、スワブの黒い線を挟むようにして折ると、比較的きれいに折れます。

