

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 24 年 10 月 9 日(火)受付分より

《変更内容》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.51	1376	抗糸球体基底膜抗体 (抗 GBM 抗体)	所要日数	2 ~ 3 日	4 ~ 7 日
			検査方法	FEIA 法	EIA 法
			単位	U / mL	EU
			基準値	7U / mL 未満 陰性	10EU 未満 (-)
			最小 報告値	1U / mL 以下	10EU 未満
			最大 報告値	858U / mL 以上	300EU 以上
P.52	1365	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA)	所要日数	2 ~ 3 日	4 ~ 6 日
			検査方法	FEIA 法	ELISA 法
			単位	IU / mL	EU
			基準値	2IU / mL 未満 陰性	10EU 未満
			最小 報告値	1IU / mL 以下	10EU 未満
			最大 報告値	177IU / mL 以上	300EU 以上

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.52	1419	抗好中球細胞質抗体 (MPO-ANCA)	所要日数	2 ~ 3日	4 ~ 6日
			検査方法	FEIA 法	ELISA 法
			単位	IU / mL	EU
			基準値	3.5IU / mL 未満 陰性	20EU 未満
			最小報告値	0.5IU / mL 以下	20EU 未満
			最大報告値	134.0IU / mL 以上	640EU 以上

定量値と判定結果を併せてご報告致します。各項目のそれぞれのコード及び判定基準は下記のとおりです。

検査項目名称	検査コード (定量値が入るコード)	判定結果が入るコード	判定基準		
			陰性	疑陽性	陽性
抗糸球体基底膜抗体 (抗 GBM 抗体)	1376	6836	< 7U/mL	7 ~ 10U/mL	> 10U/mL
抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA)	1365	7789	< 2IU/mL	2 ~ 3IU/mL	> 3IU/mL
抗好中球細胞質抗体 (MPO-ANCA)	1419	7790	< 3.5IU/mL	3.5 ~ 5.0IU/mL	> 5.0IU/mL


その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 精度向上と所要日数短縮を目的とした検査試薬変更のため

《相関図》


抗 GBM 抗体

判定一致率 100.0%	現行法			合計	
	陰性	判定保留	陽性		
新法	陰性	23	0	0	23
	疑陽性	0	0	0	0
	陽性	0	0	18	18
合計	23	0	18	41	

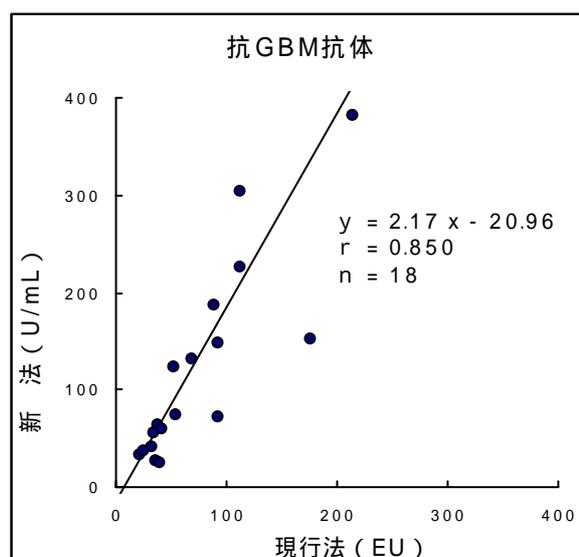

PR3-ANCA

判定一致率 97.5%		現行法		合計
		陰性	陽性	
新法	陰性	47	0	47
	疑陽性	0	0	0
	陽性	2	32	34
合計		49	32	81

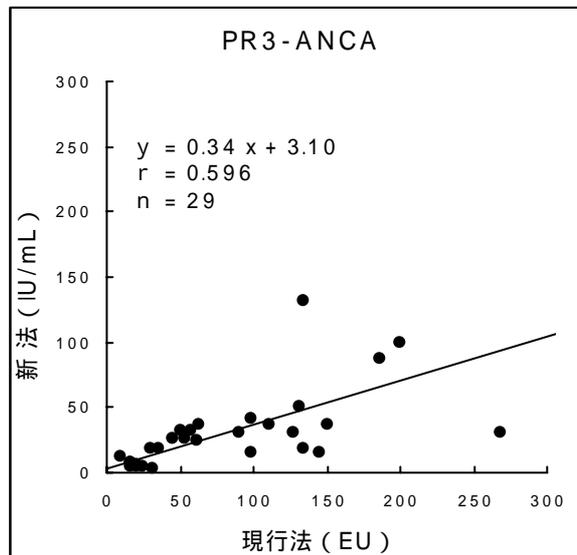

MPO-ANCA

判定一致率 91.7%		現行法		合計
		陰性	陽性	
新法	陰性	59	4	63
	疑陽性	1	0	1
	陽性	5	52	57
合計		65	56	121

